


TPS2 STAND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

English

PARTS LIST		
Item	Description	Qty
1	Steel Base	1
2	Washer	1
3	Tube	1
4	LG Basket	1
5	Mount Blocks	2
7	Washer	2
8	Cap Nut	2
9	Screw	2
10	Mount Plate	1
11	Screw	2
12	Bolt	1
PACKAGING		
NOT SHOWN	Wrench	1
	Carton	1
	Instruction Sheet	1

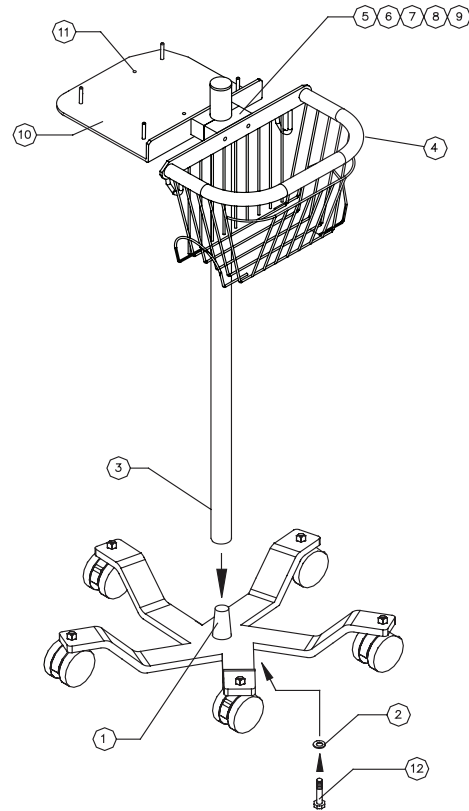

PROCEDURE

1. Press tube onto base. Secure with washer and screw.
2. Place mounting blocks around tube. Blocks should be placed over the locating pin near the top of the tube.
3. Place the screws through the mount plate and mount blocks. The posts on the mount plate must be on the top. Secure with the washer and cap nut.

Position the T/Pump® between the posts on the bracket. T/Pump® can be permanently affixed to the bracket with the included screws.

CLEANING

The TPS2 stand can be cleaned with a damp cloth and mild detergent.

WARRANTY

Stryker equipment and products are warranted against defects in material and workmanship under normal use, and operation from the date of purchase, for the time periods listed below for the respective equipment and products. Except for such warranty, Stryker disclaims all other expressed and/or implied warranties including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and of fitness for a particular purpose.


All labor performed and parts provided free of charge for a period of one (1) full year from the date of purchase, provided the equipment is returned with prior authorization prepaid to Stryker Industries.



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR BASE MOBILE TPS2

Français

LISTE DES PIÈCES		
Article	Description	Qté
1	Base d'acier	1
2	Rondelle	1
3	Tube	1
4	Panier LG	1
5	Blocs de support	2
7	Rondelle	2
8	Écrou borgne	2
9	Vis	2
10	Plaque de support	1
11	Vis	2
12	Boulon	1
PACKAGING		
NOT SHOWN	Clé	1
	Carton d'emballage	1
	Feuille d'instructions	1

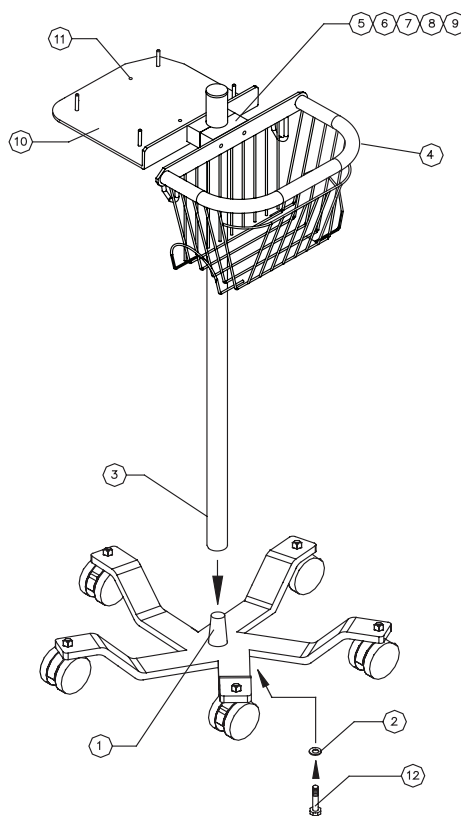

1. Introduire le tube dans la base en poussant. Fixer avec la rondelle et la vis.
2. Placer les blocs de support autour du tube. Les blocs devraient être placés audessus du goujon de guidage près du haut du tube.
3. Placer les vis à travers la plaque de support et les blocs de support. Les montants sur la plaque de support doivent être sur le dessus. Fixer avec la rondelle et l'écrou borgne.

Positionnez le T/Pump® entre les montants sur le support. Le T/Pump® peut être fixé en permanence au support à l'aide des vis incluses.

Nettoyage: La base mobile TPS2 peut être nettoyée avec un chiffon humide et un détergent doux.

GARANTIES


Les appareils et produits Stryker sont garantis contre les défauts de matériau et de fabrication, dans des conditions d'utilisation et de fonctionnement normales à compter de la date d'achat, pour les périodes indiquées ci-dessous pour les appareils et les produits respectifs. À l'exception de la présente garantie, Stryker décline toute autre garantie expresse et/ou tacite, y compris, sans pour autant s'y limiter, les garanties tacites relatives à la commercialisation ou au caractère approprié du produit pour un usage particulier.

Les pièces et la main-d'œuvre sont gratuites pendant une période d'un (1) an complet à compter de la date d'achat, à condition que l'équipement soit renvoyé en port payé, sur autorisation préalable aux usines Stryker.



INSTRUCCIONES DE ARMADO DE LA BASE TPS2

LISTA DE PIEZAS		
Artículo	Descripción	Cant.
1	Base de acero	1
2	Arandela	1
3	Tubo	1
4	Cesta grande LG	1
5	Bloques de montaje	2
7	Arandela	2
8	Tuerca ciega	2
9	Tornillo	2
10	Placa de montaje	1
11	Tornillo	2
12	Perno	1
EMPAQUE		
NO SE ILUSTR	Llave	1
	Caja de cartón	1
	Hoja de instrucciones	1

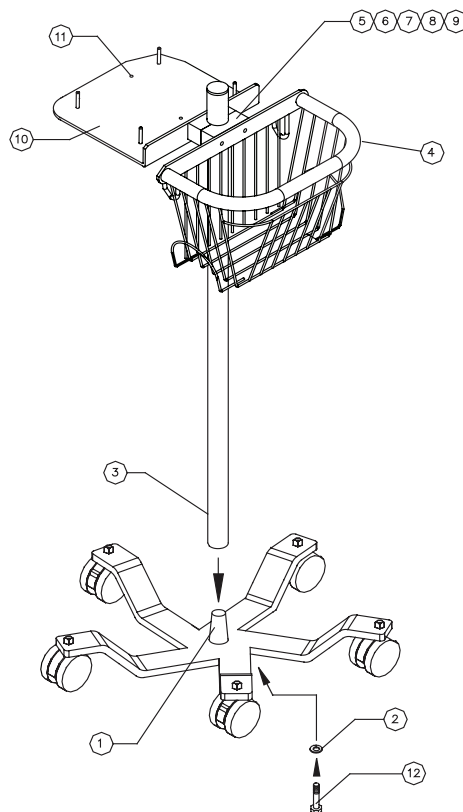

Español

1. Introduzca el tubo presionándolo en la base. Fíjelo con una arandela y un tornillo.
2. Coloque los bloques de montaje alrededor del tubo. Los bloques deben colocarse sobre el pasador posicionador cerca del extremo superior del tubo.
3. Pase los tornillos por la placa y los bloques de montaje. Las patillas de la placa de montaje deben estar en la parte superior. Fije el conjunto con una arandela y una tuerca ciega.

Coloque la bomba T/Pump entre las patillas del soporte. Utilice los tornillos provistos si desea fijar la bomba T/Pump de modo permanente al soporte.

Limpieza: Utilice un paño húmedo y detergente suave para la base TPS2.

GARANTÍAS

Se garantizan los equipos y productos Stryker contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso normal y se garantiza su funcionamiento desde la fecha de compra, por los períodos indicados abajo, para los respectivos equipos y productos. Con la excepción de esta garantía, Stryker rechaza toda otra garantía explícita y/o tácita, incluidas, sin limitaciones, las garantías tácitas de aptitud para la venta e idoneidad para un propósito específico.

Toda la mano de obra realizada y las piezas provistas sin cargo durante el período de un (1) año completo desde la fecha de compra, siempre que el equipo se devuelva con autorización y pagado por anticipado a Stryker Industries.

CE
stryker®

EC	REP
-----------	------------

Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110
Amsterdam
1101 CM
Netherlands



Stryker Medical
3800 E. Centre Ave.
Portage, Michigan 49002
USA

Telephone 1-800-327-0770

stryker[®]